

> Innovative Produkte,  
die Menschen helfen.

**reha medi**  
Hoffmann GmbH

# Curalizer®



Mehr entdecken



easy to clean



> **IDEAL FÜR PFLEGE, TRANSPORT  
UND PATIENTENMOBILISATION**



 entwickelt. gestaltet. produziert.  
made in Germany

> Produktvideo auf:  
[www.fruehmobilisation.com](http://www.fruehmobilisation.com)

[www.rehamedi.de](http://www.rehamedi.de)



## Produktmerkmale

Mit dem Curalizer bleibt der Patient in einer stabilen Position bei Neigungsverstellung der Rückenlehne, Scherkräfte auf den Patienten werden vermieden und das Pflegepersonal durch die Minimierung von Lagerungs- und Repositionierungsmaßnahmen entlastet.

Eine positionsunabhängige Höhenverstellung, je nach gewählter Ausstattung mechanisch oder elektrisch, gewährleistet das Einstellen einer ergonomischen Arbeitshöhe für das Pflegepersonal.

Die viskoelastische und abnehmbare Polsterung mit


wischdesinfizierbaren Bezügen ist druckentlastend und ermöglicht ein längeres, schonendes Sitzen. Durch schwenkbare Armlehnen ist ein barrierefreier Transfer auch bei Rückenschräglage möglich - besonders hilfreich bei Patienten mit respiratorischer Insuffizienz.

Das abnehmbare Kopfteil erweitert die Möglichkeiten in der Patientenpflege. Vier schwenkbare, große Laufrollen mit Zentralbremsystem und Richtungsfeststellung gewährleisten eine sichere und einfache Manövrierbarkeit auch auf engstem Raum.

## Ausstattungsoptionen



Art.-Nr. 8040300  
Bezeichnung Nackenkissen

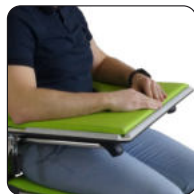

Art.-Nr. 8040100  
Bezeichnung Tisch mit Polster



Art.-Nr. 5040005  
Bezeichnung Pelottengurt



Art.-Nr. 6040110  
Bezeichnung Thoraxgurt



Art.-Nr. 6040110  
Bezeichnung Sitzhose



Art.-Nr. 8040701  
Bezeichnung Lagerungsrolle



Art.-Nr. 6040119  
Bezeichnung Stabilisierungskissen



Art.-Nr. 6040202  
Bezeichnung Infusionsstativ



Art.-Nr. 6050001  
Bezeichnung Zusatzakku

**> werksseitige Optionen**

Art.-Nr. 8240300  
Bezeichnung Verbreiterung

## > Technische Daten

Sitzhöhe einstellbar .....	45 - 73 cm
Sitztiefe.....	45 cm
Sitzbreite .....	50 cm
Gesamtbreite .....	60 cm
Gesamtlänge (Sitzposition).....	95 cm
leichtgängige Laufräder.....	Ø 125 mm
Eigengewicht .....	ca. 65 kg
höchstzulässiges Patientengewicht .....	230 kg

## > Verbreiterte Ausführung Art.-Nr. 8240300

Sitzbreite .....	60 cm
Gesamtbreite.....	71 cm

## > Farbauswahl

