

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt Code	APH235
Risiko Kategorie	Sehr Hoch
Max Patienten-Gewicht	254 kg
Zell-Zyklus	1 zu 2 (10 Minuten)
Statischer Kopfbereich	✓
27 individuelle Tiefen-Zellen	✓
Wechseldruck-Betrieb	✓
Konstanter Niederdruckmodus	✓
Zeitgesteuerter maximaler Aufblasmodus (20 Minuten)	✓
Links- und Rechtsdrehung mit variablen Timing-Optionen	✓
Breite	900 mm
Länge	2000 mm
Tiefe	150 mm
Maratzen-Gewicht	13 kg
Gewicht der Pumpen-Einheit	2.7 kg
Störungs-Alarm	✓
Stromausfalls-Alarm	✓
Bequem zu greifende Griffe	✓
Kabel-Management	✓
CPR	✓
Dampfdurchlässiger Multi-Stretch-Überzug	✓
Als bariatrische Version verfügbar	✓



Aufgrund laufender Forschung und Entwicklung behält sich Apollo Healthcare Technologies Ltd das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dies hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Systems. Anweisungen zur Verwendung finden Sie immer im Benutzerhandbuch.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam:

ORTHOmedical® 
PFLEGE- UND MEDIZINTECHNIK

4890 Frankenmarkt
Hauptstraße 70
frankenmarkt@orthofit.at

+43 (0)7684 21460
+43 (0)7684 21460 - 90

ORTHOFit GmbH  www.orthofit.at www.orthomedical.at



Very High Risk

Apollo Morpheus Turn

AHSM-058 Rev 1.0 (23.12.2023)

Morpheus Turn ist ein dynamisches Matratzenersatzsystem mit programmierbarer, kontinuierlicher Wendefunktion und Wendehilfe!

- Das dynamische Matratzenersatzsystem **Morpheus Turn** bietet eine optimale Therapie zur Vorbeugung und Behandlung von Dekubitus in jeder Pflegeumgebung.
- Morpheus Turn** kombiniert eine dynamische Matratze für Personen mit sehr hohem Risiko mit der zusätzlichen seitlichen Drehfunktion von bis zu 18 Grad. Dadurch wird der Auflagedruck um bis zu 50 % reduziert und die Kapillaren stärker stimuliert.




Apollo Morpheus Turn

- Das manuelle Wenden von Patienten ist besonders nachts belastend und führt oft zu Schlafstörungen. Die Morpheus Turn-Matratze reduziert diese Eingriffe an Patienten durch die Möglichkeit einer automatisierten Drehung nach rechts oder links um bis zu 18 Grad, in einer variablen Zeitspanne zwischen 10 Minuten und 4 Stunden.

- Die Morpheus Turn besteht aus 27 10-cm-Zellen, die sowohl eine alternierende als auch konstante Niederdrucktherapie für Patienten bis zu 254 kg ermöglichen.



Die Matratze verfügt über vollautomatische Links- und Rechtsdehnung bis zu 18 Grad und 6 einzelne seitliche Stützzellen ermöglichen das Wenden auch bei profiliertem Bett.

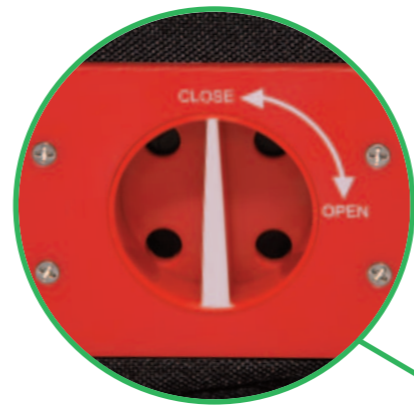

Ein bündiger CPR-Drehschalter verhindert Probleme bei der Verwendung von Bettgittern und Zubehör.

Very High Risk

Dampfdurchlässiger Multi-Stretch Überzug.



Befestigungs-Gurte


Kabel-Management.

Pumpen-Einheit

2 x 3 seitliche Stützzellen ermöglichen das Wenden des Patienten auch bei profiliertem Bett.

27 einzelne Tiefenzellen sorgen für einen geringeren Restoberflächendruck und erhöhen den Komfort.

Die integrierte 5cm - Schaumbasis sorgt für eine verbesserte Stabilität bei Verwendung der Drehfunktion.

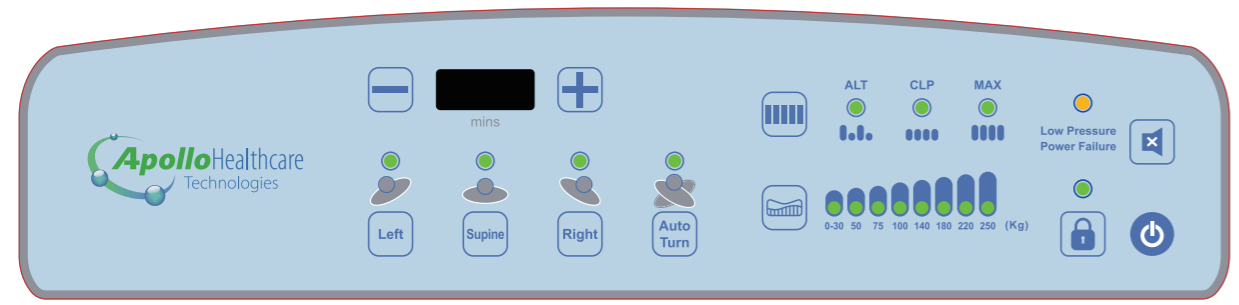

Morpheus Turn Bedienfeld