

Mobilizer[®] Ottfried

Patientenmobilisation - Ergonomisch, sicher und komfortabel

- sichere Sitz-Mobilisation von Patienten mit einem Gewicht von bis zu 250 kg
- stufenlos zwischen Liege- und Sitzpositionen, sowie in der Höhe als auch in der Sitzneigung elektrisch verstellbar
- Aktivierende Position, Ruheposition und Kopftieflage möglich
- schwenkbare Armauflagen für einen barrierefreien seitlichen Transfer
- patientierter Längenausgleich reduziert die Scherkräfte bei Verstellung der Rückenlehne - Dekubitusprophylaxe
- individuell auf die Patientengröße anpassbar dank elektrischem Fußtritt mit extra großem Verstellbereich



Produktmerkmale

Patentiertes Sitzkonzept mit Längenausgleich und automatischer Sitzkantelung

Der Patient bleibt in einer stabilen Position bei Neigungsverstellung der Rückenlehne, Scherkräfte auf den Patienten werden reduziert und das Pflegepersonal durch die Minimierung von Lagerungs- und Repositionierungsmaßnahmen entlastet.

Eine elektrische Höhenverstellung gewährleistet das Einstellen einer ergonomischen Arbeitshöhe für das Pflegepersonal und sorgt für den positiven psychologischen Aspekt: Der Patient ist auf Augenhöhe mit seiner Umgebung. Die stufenlose Verstellung der Sitzneigung ermöglicht es, Patienten so zu positionieren, dass erhöhter Bandscheibendruck und Fußsohlenkontakt die Förderung der Vigilanz unterstützen. Die Vielseitigkeit des Mobilizer[®] Ottfried unterstützen Pflegende und Therapeuten unter anderem beim Delirmanagement

und der Atmungstherapie.

Die viskoelastische und abnehmbare Polsterung mit wischdesinfizierbaren Bezügen ist druckentlastend und ermöglicht ein längeres, schonendes Sitzen, auch für immobile Patienten. Ihnen steht eine vielfältige Farbauswahl zur Verfügung.

Durch schwenkbare Armlehnen ist ein barrierefreier Transfer auch bei Rückenschräglage möglich. Dies ist besonders hilfreich bei Patienten mit respiratorischer Insuffizienz. Die in jeder Position arretierbaren Armlehnen ermöglichen die Nutzung des Therapietisches in jeder therapeutischen Sitzposition.

Für nahezu jeden Anwendungsfall stehen passende Zusatzausstattungen zur Verfügung. Gern beraten wir Sie bei der Auswahl.

Beispiele Ausstattungsoptionen



Verbreiterung



Arretierung
Armlehne



Seitenbügel




Tisch und
Polsterauflage



diverse Gurte



Infusionsstativ

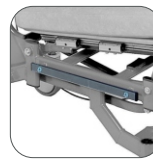

Normschienen



Rollboard



3-Kammer-
Stabilisierungskissen



Power+

Zusatzakku

Polsterfarben

Standard 1:
lime-anthrazit



Standard 2:
lavendel-anthrazit



CAPRI lemon




CAPRI lime




CAPRI kiwi




CAPRI orange

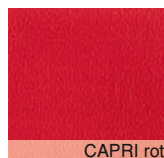


CAPRI rot

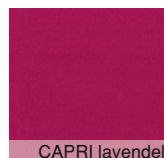


CAPRI lavendel

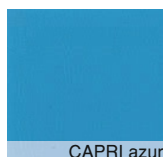

CAPRI azur

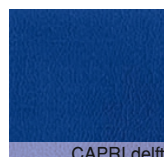

CAPRI delft

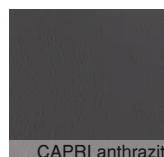

CAPRI anthrazit

Technische Daten

Einsitzweite	60 / 68 cm*
Gesamtbreite	74 - 80 cm*
leichtgängige Laufräder	Ø 150 mm
Eigengewicht	ca. 90 kg
höchstzulässiges Patientengewicht	250 kg

* bei verbreiteter Ausführung [Art.-Nr. 6040117]