

## Mobilizer<sup>®</sup> Norbert

### Therapiestuhl zur Patientenmobilisation Ergonomisch, sicher und komfortabel

- sichere Mobilisation von Patienten mit einem Gewicht bis zu 230 kg
- stufenlos zwischen Liege- und Sitzposition, sowie optional positionsunabhängig in der Höhe mechanisch oder elektrisch verstellbar
- Armauflagen vollständig nach hinten schwenkbar, für barrierefreien seitlichen Transfer
- patentierter Längenausgleich reduziert die Scherkräfte bei Verstellung der Rückenlehne - Dekubitusprophylaxe
- auf Patientengröße einstellbarer Fußtritt



## Produktmerkmale

### Patentiertes Sitzkonzept mit Längenausgleich und automatischer Sitzkantelung

Der Patient bleibt in einer stabilen Position bei Neigungsverstellung der Rückenlehne, Scherkräfte auf den Patienten werden vermieden und das Pflegepersonal durch die Minimierung von Lagerungs- und Repositionierungsmaßnahmen entlastet.


Eine optionale Höhenverstellung, je nach gewählter Ausstattung mechanisch oder elektrisch, gewährleistet das Einstellen einer ergonomischen Arbeitshöhe für das Pflegepersonal und sorgt für den positiven psychologischen Aspekt: Der Patient ist auf Augenhöhe mit seiner Umgebung.

Die viskoelastische und abnehmbare Polsterung mit wischdesinfizierbaren Bezügen ist druckentlastend und ermöglicht ein längeres, schonendes Sitzen. Ihnen steht eine vielfältige Farbauswahl zur Verfügung.

Durch schwenkbare Armlehnen ist ein barrierefreier Transfer auch bei Rückenschräglage möglich - besonders hilfreich bei Patienten mit respiratorischer Insuffizienz.

Für nahezu jeden Anwendungsfall stehen passende Zusatzausstattungen zur Verfügung. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl.

## Beispiele Ausstattungsoptionen

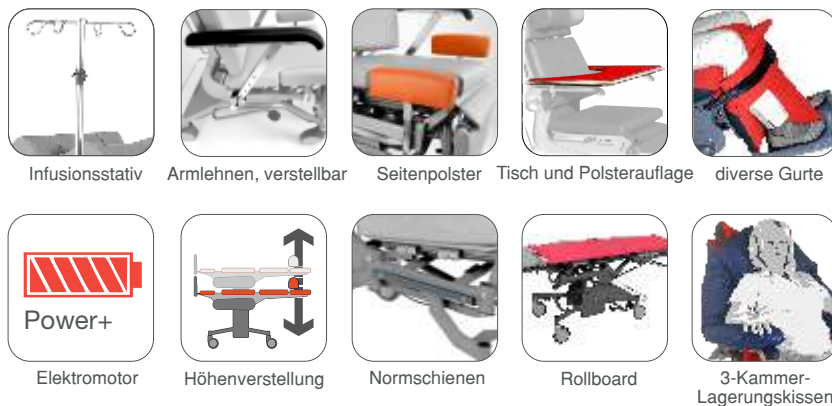

Liegeposition



verstellbarer Fußtritt



Tisch mit Polsterauflage (optional)

### Technische Daten

Liegehöhe einstellbar .....	58 - 80 cm*
Länge der Liegefläche .....	190 cm
Sitzbreite .....	57 / 65 cm**
Gesamtbreite .....	74 cm
leichtgängige Laufräder .....	Ø 150 mm
Eigengewicht .....	ca. 90 kg
höchstzulässiges Patientengewicht .....	230 kg

\* bei optionaler Höhenverstellung [Art.-Nr. 5090000]

\*\* bei verbreiteter Ausführung [Art.-Nr. 6040117]