

Mobilizer® Norbert


Mobilisation bis 250 kg – sicher & ergonomisch

ORTHOFit®

HAUS DER GESUNDHEIT

Mobilisation beginnt mit liegendem Transfer

- **sichere** und **schonende Mobilisation** von Patienten mit **bis zu 250 kg**
- **reduzierte Scherkräfte** bei Verstellung der Rückenlehne durch patentierten Längenausgleich
– DEKUBITUSPROPHYLAXE
- **Armauflagen** vollständig **nach hinten schwenkbar**, für barrierefreien seitlichen Transfer
- **abnehmbare, wischdesinfizierbare Polsterteile** entsprechen höchsten Hygieneanforderungen

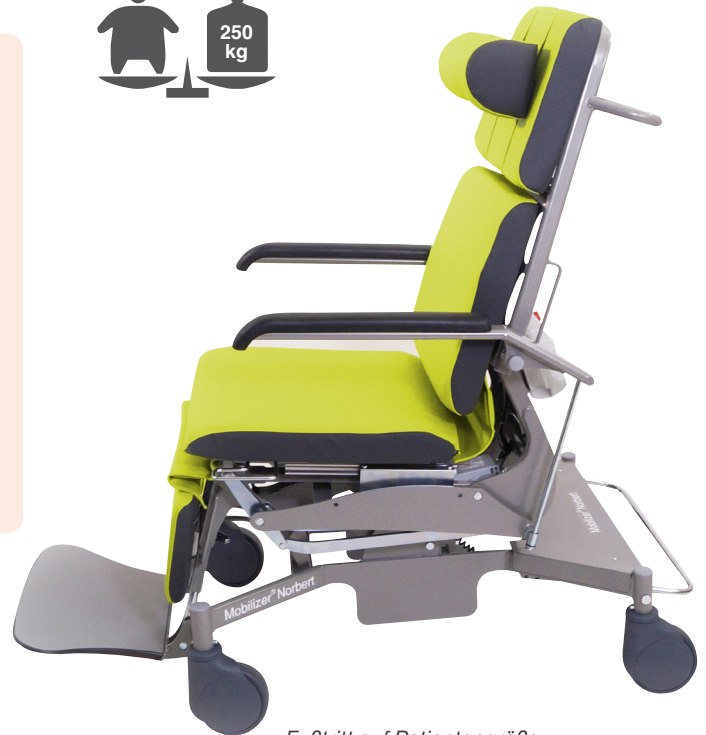

Fußtritt auf Patientengröße einstellbar



patentiertes Sitzkonzept:
Längenausgleich mit automatischer Sitzkantelung
bei Verstellung der Rückenlehnenneigung



Höhenverstellung in jeder Sitz- und Liegeposition

Technische Angaben:

Länge der Liegefläche:	190 cm
Liegehöhe einstellbar:	58–80 cm*
Sitzbreite:	57/65 cm**
Gesamtbreite:	74 cm
Eigengewicht:	ca. 90 kg
max. Patientengewicht:	250 kg
Platzbedarf:	0,85 m ²
Laufräder:	Ø 15 cm

* bei optionaler Höhenverstellung

** bei verbreiteter Ausführung

DEUTSCHES PRODUKT

Die technischen Daten können aufgrund von Toleranzen der Herstellung variieren.

Neue Maßstäbe bei Transfer und Patientenmobilisation

Der Patient bleibt in einer stabilen Position bei Neigungsverstellung der Rückenlehne, Scherkräfte auf den Patienten werden vermieden und das Pflegepersonal durch die Minimierung von Lagerungs- und Repositionierungsmaßnahmen entlastet.

Eine optionale Höhenverstellung, je nach gewählter Ausstattung mechanisch oder elektrisch, gewährleistet das Einstellen einer ergonomischen Arbeitshöhe für das Pflegepersonal und sorgt für den positiven psychologischen Aspekt: Der Patient ist auf Augenhöhe mit seiner Umgebung.

Schwenkbare Armlehnen für einen barrierefreien Transfer auch bei angestellter Rückenlehne – besonders hilfreich bei beatmeten Patienten.

Druckentlastende, viskoelastische Polsterung ermöglicht ein längeres Sitzen ohne Komplikationsgefahr.

Ausstattung:


Für nahezu jeden Anwendungsfall gibt es passende Zusatzausstattungen.

Häufig gewählte Ausstattungsoptionen:

- positionsunabhängige Höhenverstellung
- Pelottengurt und Stabilisierungskissen zur seitlichen Unterstützung im Rückenbereich
- Tisch – auf den Armauflagen arretierbar
- Normschienen unterhalb der Sitzfläche
- Infusionsständer zur beidseitigen Verwendung



opt.: Elektromotor

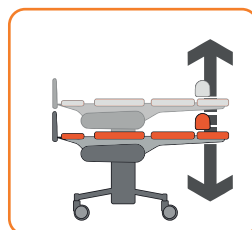

opt.: Höhenverstellung



Infusionsstativ



Tisch

EINSATZGEBIET:

Pflege- und Hospizeinrichtungen, Palliativabteilungen sowie Wachkomaabteilungen und Krankenhäuser.