


# DEKUCARE VISCO PREMIUM- LIEGESYSTEME

Komfortable Liegesysteme zur Dekubitusprophylaxe

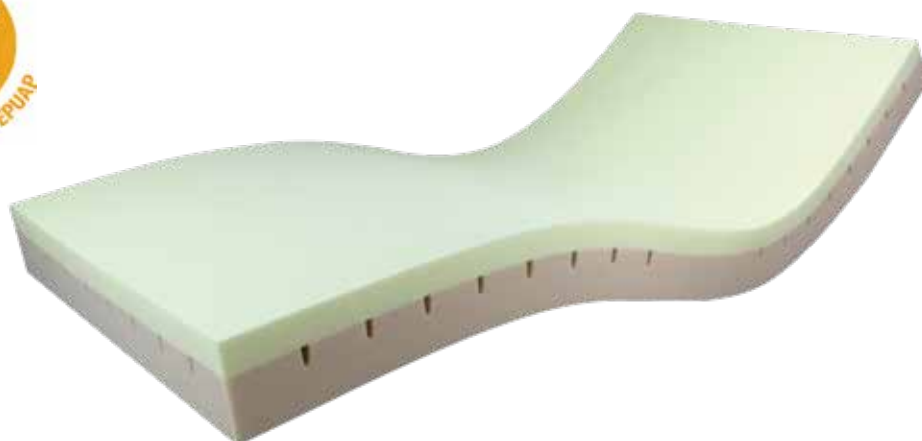

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- zweischichtige Weichlagerungsmatratze mit hervorragendem Liegekomfort und zugleich hoher Druckentlastung durch Kombination von Schaumstoffkern mit würfelartiger Struktur und durchgehender viscoelastischer Liegefläche
- diese bewirkt eine optimale Druckverteilung durch punktelastische Anpassung an die anatomischen Körperkonturen des Patienten und verbessert die Durchblutung in gefährdeten Körperbereichen
- die DEKUCARE VISCO ist optimal für schmerzempfindliche und kachektische Patienten geeignet
- Produkt ist auch mit mobilisationsfördernder Randzone lieferbar
- geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Patientengewicht: 40 bis 140 kg
- Raumgewicht: Liegeschicht: 47 kg /  
Würfelkern: 45 kg/m<sup>3</sup>
- Stauchhärte: Liegeschicht: 1,2 kPa /  
Würfelkern: 3,2 kPa
- Charakteristik: Liegeschicht: viscoelastisch /  
Würfelkern: hochelastisch
- Gewicht: ca. 13kg

## DEKUCARE VISCO

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M17483	4056538991323
200 x 100 x 14 cm	M17821	4056538998537

Andere Abmessungen auf Anfrage. Sondermaße und Bezugsvarianten sind möglich. Preise auf Anfrage!