


CARGUMIXT STRONG RZ WEICHLAGERUNGS- MATRATZE

Weichlagerungsmatratze zur Dekubitusprophylaxe
und -therapieunterstützung

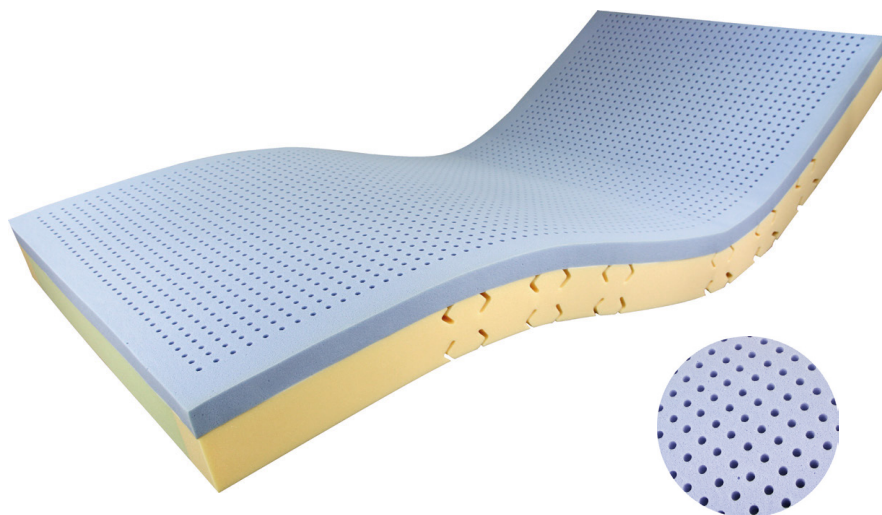

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zweischichtige Weichlagerungsmatratze mit gutem Liegekomfort und hoher Druckentlastung
- Kombination aus HR-Schaumstoffkern mit Quereinschnitten, durchgehender Liegefläche aus hochelastischer Waterlily®-Schaumstoffqualität & verstärkter Randzone mit Duplex-Einschnitten
- Klimabohrungen in der Weichlagerungsliegefläche begünstigen die Druckverteilung und optimieren die Luftzirkulation innerhalb der Matratze
- ein spezieller Duplex-Schnitt im Matratzenkern und der Randzone verbessert die Anpassung der Matratze an die Bettkinematik, z.B. bei Sitz- und Hochlagerungspositionen
- die Randzonenverstärkung erleichtert die Mobilisierung des Patienten und wirkt dauerhaft sturzprophylaktisch
- die Matratze ist mit einem scherkraftmindernden

Trikotstrumpf und einem Polyurethanvollschutzbezug umgeben

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe (bis zur Risikoeinschätzung: hohes Risiko) und -therapieunterstützung bis einschließlich Kategorie III (nach EPUAP) in Anwendungskombination mit weiteren kausal- und lokaltherapeutischen Maßnahmen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Patientengewicht: 40 bis 165 kg
- Raumgewicht / Stauch- / Eindruckhärte
Grundplatte: 42 kg/m³ / 3,5 kPa / 130 N
Deckplatte: 53 kg/m³ / 3,0 kPa / 120 N
Randzone: 50 kg/m³ / 8,0 kPa / 350 N
- Charakteristik: Liegeschicht: hochelastisch / Trägerschicht: elastisch
- Gewicht: 10,3 - 10,8 kg



CARGUMIXT STRONG inkl. Inkontinenzbezug SHP-PROTECT blau, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I + II

Abmessungen	Artikelnummer	GTIN
200 x 90 x 14 cm	M30317	4056538001930
200 x 100 x 14 cm	M30318	4056538001947

Matratzenverlängerungsset aus Verlängerung des Originalkerns 20 cm inkl. Inkontinenzbezug über die Gesamtlänge erhältlich!